

RESMED

S9 Escape™

POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE



Welcome Guide


Türkçe

S9™ Series
More. Comfort.

S9[™] | Series
More. Comfort.

Hoş geldiniz

S9 Escape'li seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu cihazı çalıştırmadan önce lütfen tüm Hoş Geldiniz ve Bilgi Kılavuzları'nı okuyunuz.

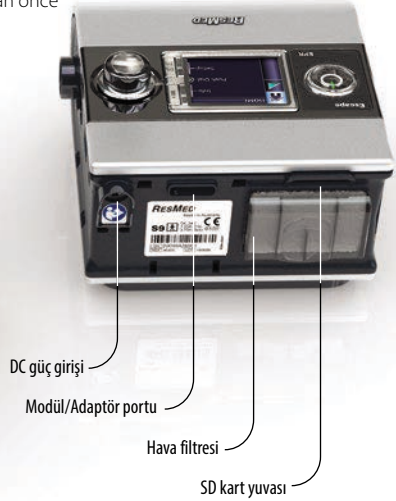

S9'a bakış

S9 sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur:

- S9 cihazı
- SlimLine hava tüpü
- 90W veya 30W güç kaynağı birimi
- S9 seyahat çantası
- SD kart
- S9 SD kart koruyucu kılıfı.


Opsiyonel bileşenler şunlardır:

- H5i ısıtılmış nemlendirici
- H5i su haznesi
- Standart hava tüpü
- ClimateLine ısıtılmış tüp
- ClimateLine^{MAX} ısıtılmış tüp
- 90W güç kaynağı birimi
- 30W güç kaynağı birimi (H5'i desteklemez)
- Power Station II batarya paketi
- DC/DC Dönüştürücü 24 V/90 W.

Seyahat önerileri

Yalnız S9 cihazınızla seyahat ederken:

- ClimateLine veya ClimateLine^{MAX} ısıtılmış hava tüpü doğrudan S9 cihazına bağlanmak için tasarlanmadığından, SlimLine veya Standart hava tüpünü yanınıza aldığınızdan emin olun.
- Lütfen S9 cihazınızı kullanacağınız bölge için onaylı güç kablосunu satın aldığınızdan ve seyahatinizde yanınızda bulduğunuzdan emin olun.

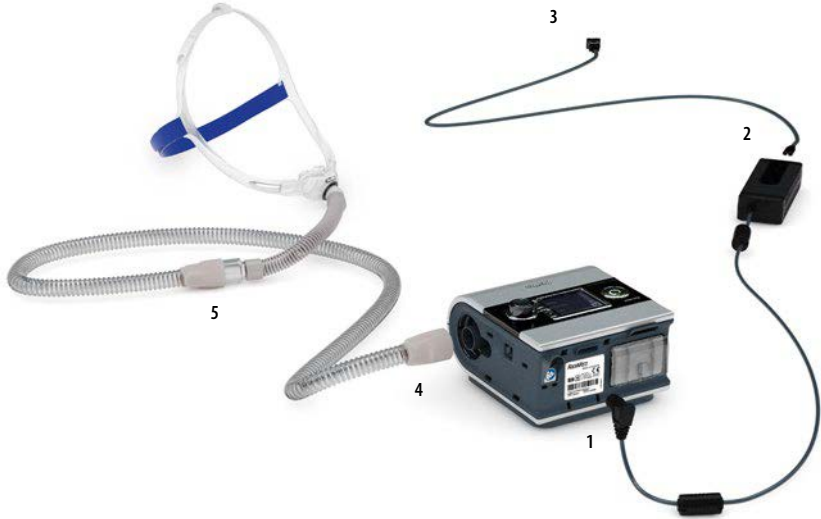

Kurulum

1. Güç kaynağı biriminin DC kablosunu S9'un arkasına bağlayın.
2. Güç kablosunu güç kaynağı birimine bağlayın.
3. Güç kablosunun diğer ucunu prize takın.
4. Hava tüpünün bir ucunu sıkıca hava çıkışına bağlayın.
5. Monte edilmiş maske sistemini hava tüpünün serbest ucuna bağlayın.

Notlar:

- Maskenizin montajı hakkında daha fazla bilgi için maske kullanım kılavuzuna bakın.
- Tavsiye edilen maskeler www.resmed.com adresinde Products (Ürünler) sayfasında Service & Support (Ürün Servis ve Destek) bölümünün altında bulunabilir.

S9 temel özellikleri

Başlat/Durdur düğmesi
Tedaviyi başlatır veya durdurur.

Ana menü

LCD ekran


Bilgi menüsü*
Uyku istatistiklerinizi görüntülemenizi sağlar.


Kurulum menüsü*
Ayarları değiştirmenizi sağlar.


Dial tuşu
Dial tuşunun çevrilmesi menüde gezinmenizi ve ayarları değiştirmenizi sağlar. Dial tuşuna basılması bir menüye girmenizi ve seçiminizi onaylamanızı sağlar.

Tuş:


Anasayfa 


Nemlilik Düzeyi 


Yükselme 


Istıtlmış tüp 

Climate Control 

Başlat/Durdur 

Dial tuşu 

Kurulum menüsü 

Bilgi menüsü 

*Klinisyeniniz tarafından S9 Essentials etkinleştirilmişse Bilgi ve Kurulum menüleri devre dışı bırakılır.





S9 Essentials

S9 Essentials cihazla etkileşim ve menü navigasyonunu sizin için daha kolay hale getirmek üzere tasarlanmıştır. Klinisyen tarafından etkinleştirilmişse S9 Essentials basitçe tedaviyi başlatıp durdurabilmeniz ve rampa, nemlendirme ve Climate Control'u ayarlayabilmeniz için Bilgi ve Kurulum işlevselliğini devre dışı bırakır.



Menülerde gezinme

Genel olarak menülerde gezinmek için:



1. İstediğiniz parametre mavi olarak gösterilene kadar  düğmesini çevirin.
2.  düğmesine basın. Bu seçim turuncu renkle belirtilecektir.
3. İstediğiniz ayarı görene kadar  düğmesini çevirin.
4. Seçiminizi onaylamak için  düğmesine basın. Ekran maviye döner.

Başlarken

1. Gücün bağlı olduğundan emin olun.
2. Gerekirse yükselme süresini ayarlayın.
3. Maskenizi, maske kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde takın.
4. Tedaviye başlamak için, şu düğmeye basın .
5. Yatağa uzanın ve hava tüpünü uykunuzda hareket etmeniz de serbest kalacak şekilde ayarlayın.
6. Tedaviyi herhangi bir anda durdurmak için şu düğmeye basın .

Notlar:

- Tedavi başladıktan sonra bir tedavi ekranı görüntülenir.
- Tedavi sırasında güç kesilirse tekrar güç geldiğinde cihaz tedaviyi otomatik olarak tekrar başlatır.

Temizlik ve bakım

Bu cihazın bakımıyla ilgili detaylı talimatlar için maskenizin ve nemlendiricinizin kullanıcı kılavuzuna bakın.

Günlük

Kelepçe üzerindeki parmak tokalarını çekerek hava tüpünü çıkarın. Bir sonraki kullanıma kadar temiz, kuru bir yere asın.

Notlar:

- Hava tüpünü doğrudan güneş ışığı altına asmayın çünkü zamanla sertleşebilir ve sonuçta kırılabilir.
- Hava tüpünü çamaşır veya bulaşık makinesinde yıkamayın.

Haftalık

1. Hava tüpünü S9 cihazı ve maskeden çıkarın.
2. Hava tüpünü hafif deterjanla ılık suda yıkayın.
3. İyice durulayın, asın ve kurumaya bırakın.
4. Sonraki kullanımdan önce hava tüpünü hava çıkışına ve maskeye tekrar bağlayın.

Aylık

1. S9'un dışını nemli bir bez ve hafif bir deterjanla silin.
2. Hava filtresinde delikler ve kirden dolayı tıkanmalar olup olmadığını kontrol edin. Gerekliğinde hava filtresini yenisiyle değiştirin.

Hava filtresinin değiştirilmesi

Hava filtresini altı ayda bir (veya gerekirse daha sık) değiştirin.

1. Hava filtresi kapağını S9 cihazının arkasından çıkarın.
2. Eski hava filtresini çıkarıp atın.
3. Yeni bir ResMed hava filtresini, filtre kapağı üzerinde düz olarak oturduğundan emin olarak takın.
4. Hava filtresi kapağını değiştirin.

Notlar:

- Hava filtresinin ve hava filtresi kapağının her zaman takılı olmasını sağlayın.
- Hava filtresini yıkamayın. Hava filtresi yıkanamaz veya tekrar kullanılamaz.

Hava filtresi kapağı



Hava filtresi




SD kart

S9 cihazınızdan tedavi verilerini toplamak ve doktorunuzdan ayar güncellemeleri temin etmek için bir SD kart tedarik edilmiştir. Yönlendirildiğiniz takdirde, S9 cihazını fişten çekin, SD kartınızı çıkarın, koruyucu kılıfa koyun ve doktorunuza gönderin.

Kartın çıkarılması

1. Serbest bırakmak için SD kartı itin.
2. Kartı çıkarın.
3. Kartı koruyucu kılıfın içine koyun.
4. Yönlendirildiği şekilde koruyucu kılıfı doktorunuza geri gönderin.

Kartın çıkarılması ve takılması ile ilgili daha fazla bilgi için, cihazınızla birlikte tedarik edilen S9 SD Kart Koruyucu Kılıfı'na bakınız. Lütfen S9 SD Kart Koruyucu Kılıfı ilerde kullanmak için saklayın.

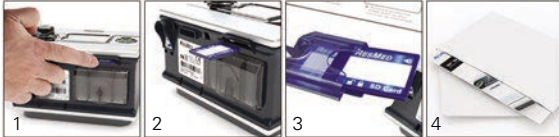

Notlar:

- Sorun giderme bilgisi için Bilgi Kılavuzu'na bakın.
- Daha fazla ürün bilgisi için www.resmed.com sitesine bakın.

S9[™] | Series
More. Comfort.

368870/1 2012-10

S9 Escape

WELCOME
EUR 1/3



Manufacturer: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. Distributed by: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. **EC REP** ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip.

S9, S9 Escape, H5i, SlimLine and ClimateLine are trademarks of ResMed Ltd and S9, H5i, SlimLine and ClimateLine are registered in U.S. Patent and Trademark Office.

© 2012 ResMed Ltd.

